

HEKO

NAVODILA ZA UPORABO

Masažni stol iRest Chillin+

Model A360 · barvi črna in bež

Shranite ta navodila. Pred prvo uporabo jih preberite v celoti.

Različica 1.0 · oktober 2026

Vsebina

Varnostna navodila 3

Namestitev nožnega dela 6

Postavitev in premikanje 7

Pred uporabo 8

Zgradba stola 10

Daljinski upravljalnik 11

Masaža 12

Predvajanje glasbe prek Bluetootha 14

Konec masaže in izklop 14

Čiščenje in vzdrževanje 15

Odpravljanje težav 16

Tehnični podatki 17

Odlaganje izrabljenega stola 17

Servis, garancija in stik 18

Pomembno

Hvala za nakup. Pred uporabo pozorno preberite ta navodila, da boste stol uporabljali pravilno in varno. Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom in navodila shranite za poznejšo uporabo.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka. Če se delovanje stola, ki ga imate, v kakšni podrobnosti razlikuje od opisa v teh navodilih, gre za običajno posodobitev izdelka, o kateri proizvajalec posebej ne obvešča. Velja dejanska izvedba in barva izdelka.

1

Varnostna navodila

Pred uporabo preberite vsa navodila. Opozorila v nadaljevanju vam pomagajo stol uporabljati varno in pravilno. Glede na to, kako hude so lahko posledice napačne uporabe, so razdeljena na »Opozorilo« in »Pozor«; oboje je pomembno za varnost in se ga je treba držati. Bodite pozorni na znak pred vsako varnostno točko.

Opozorilo
Napačna uporaba lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

Pozor
Napačna uporaba lahko povzroči lažje poškodbe ali škodo na stvareh.

Prepovedano
Tega nikoli ne storite.

Stola ne smejo uporabljati

- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali živčnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih je poučila o uporabi. Otroke je treba nadzorovati, da se s stolom ne igrajo.
- Osebe z osteoporozo.
- Osebe z boleznijo srca ali z vgrajenimi elektronskimi medicinskimi pripomočki, kot je srčni spodbujevalnik.
- Osebe s povišano telesno temperaturo.
- Nosečnice in ženske med menstruacijo.
- Poškodovane osebe in osebe s kožnimi boleznimi.
- Otroci, mlajši od 14 let, in osebe, ki niso pri zavesti, brez nadzora.
- Osebe, ki jim je zdravnik predpisal počitek, in osebe, ki se slabo počutijo.
- Osebe z mokrim telesom.
- Stol ima vročo površino. Osebe, ki so neobčutljive na toploto, naj bodo pri uporabi posebej pozorne.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zaradi varnosti zamenjati samo proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljena oseba.

⚠ Opozorilo: pomembna varnostna opozorila

- Otrokom ne dovolite dotikati se gibljivih delov stola.
- Uporabljajte ustrezno ozemljeno vtičnico, primerno za ta stol.
- Po uporabi in pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite poškodbe oseb ali stola.
- Stol uporabljajte tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Ne uporabljajte delov ali dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Stola ne uporabljajte na prostem.
- Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo.
- Stola nikoli ne uporabljajte za namen, ki ni opisan v teh navodilih.
- Priporočena dolžina ene masaže je 20 minut.
- Stola ne uporabljajte, če je prevleka iz tkanine ali umetnega usnja strgana ali poškodovana.
- V stol ne spuščajte predmetov.
- Med masažo ne zaspite.
- Stola ne uporabljajte pod vplivom alkohola ali če se slabo počutite.
- Stola ne uporabljajte eno uro po obroku.
- Stola ne obremenjujte s pretirano silo; nevarnost poškodbe.

⚠ Pozor: varnostni ukrepi

- Preverite, ali napetost v vašem omrežju ustreza podatkom stola.
- Vtiča nikoli ne vtikajte ali izvlecite z mokrimi rokami.
- V stol ne sme zateči voda; nevarnost električnega udara in poškodbe stola.
- Pri vtikanju in izvlačenju vtiča ne vlecite za kabel. Grobo ravnanje je prepovedano.
- Ne poškodujte kabla in ne spreminjajte električne napeljave stola.
- Delov pod napetostjo, kot sta stikalo in vtič, ne čistite z mokro krpo.
- Ob izpadu elektrike se od stola odmaknite, da vas ob nenadni vrnitvi napetosti ne poškoduje.
- Če stol deluje nenavadno, ga takoj nehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca.
- Če se med uporabo slabo počutite, ga nehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

⚠ Pozor: servis in vzdrževanje

- Stol sme servisirati samo servis, ki ga določi proizvajalec. Uporabnik ga brez dovoljenja ne sme razstavljati ali popravljati.
- Po uporabi ne pozabite izklopiti glavnega stikala.
- Stola ne uporabljajte, če je vtičnica razmajana.
- Če stola dalj časa ne boste uporabljali, zvijte napajalni kabel in stol hranite v suhem prostoru brez prahu.
- Stola ne hranite pri visoki temperaturi ali blizu odprtega ognja. Ne izpostavljajte ga dolgotrajnemu neposrednemu soncu.
- Čistite ga s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola.
- Mehanski deli stola so posebej zasnovani in izdelani; posebno vzdrževanje ni potrebno.
- Stola ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Stola ne kotalite in ne vlecite po neravnih tleh; pred premikom ga dvignite.
- Stol uporabljajte s premori. Ne sme delovati neprekinjeno dalj časa.

⚠ Pozor: okolje uporabe

- Stola ne uporabljajte v zelo vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Ob nenadni spremembi temperature v prostoru uporabo takoj prekinite.
- Stola ne uporabljajte v zelo prašnem ali jedkem okolju.
- Stola ne uporabljajte v majhnem prostoru ali v prostoru brez dobrega prezračevanja.

Pogoji shranjevanja

- Temperatura prostora od 5 °C do 40 °C.
- Relativna vlažnost od 20 % do 80 %, brez jedkih plinov, dobro prezračen prostor.

⚠ Pozor: običajne motnje


- Zvok motorja med delovanjem je običajen.
- Če upravljalnik ne deluje, preverite, ali sta vtič in vtičnica trdno povezana in ali je stikalo vklopljeno.
- Po izteku nazivnega časa delovanja se stol samodejno izklopi. Če deluje dalj časa, ga samodejno ustavi toplotna zaščita; znova ga lahko uporabite po pol ure.

2


Namestitev nožnega dela

Nožni del (mehanizem za masažo meč in stopal) namestite po naslednjih korakih.


1. Kabel in zračno cev nožnega dela priključite na sprednji priključek jeklenega ogrodja (slika 1).
2. Povezani kabel in zračno cev potisnite v odprtino v ogrodju naslona (slika 2).
3. Ko sta kabel in cev povezana, odprite pokrova za pritrditev nožnega dela na obeh straneh jeklenega ogrodja (slika 3).
4. Nožni del dvignite v ležišči, zaprite pokrova in ga pritrdite z dvema vijakoma (slika 4).

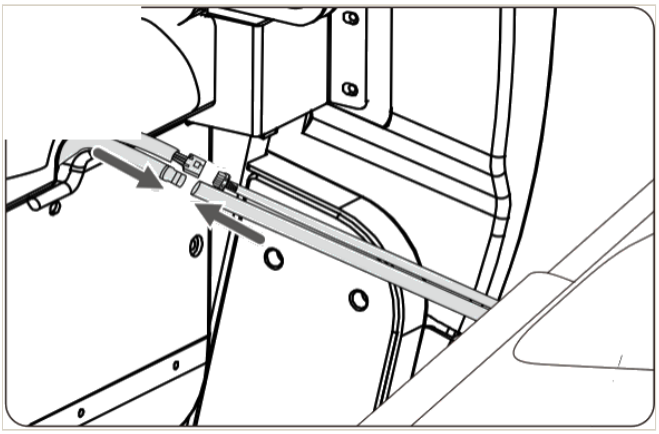


Slika 1: kabel in zračna cev v sprednji priključek

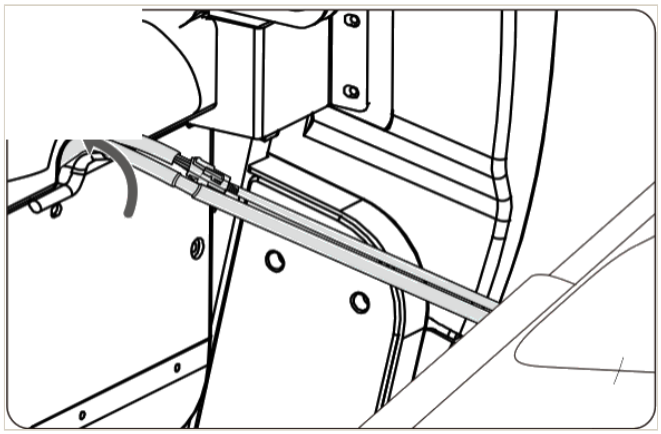

Slika 2: povezava potisnjena v odprtino ogrodja naslona

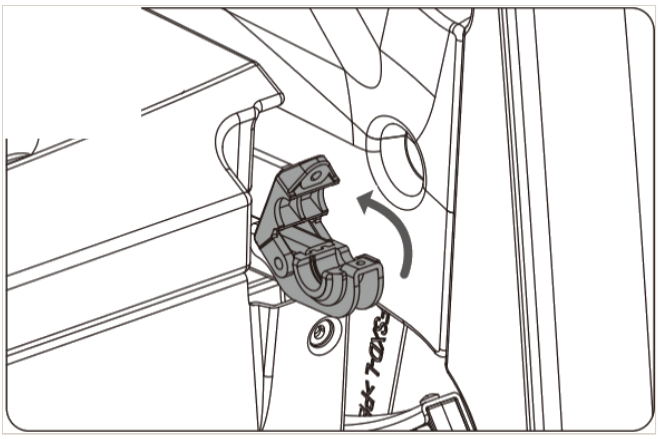

Slika 3: odprt pokrov za pritrditev

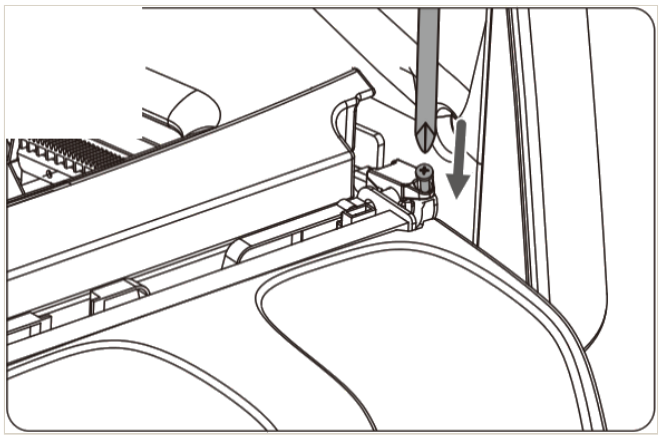

Slika 4: zaprt pokrov, pritrditev z vijakom


3

Postavitev in premikanje

Kam postaviti stol

Za stolom pustite vsaj 30 cm prostora, da se lahko nagne.

Stola ne izpostavljajte visoki temperaturi zaradi sonca ali grelnih teles (na primer pred radiatorjem). Postavite ga tja, kjer se izogne vročini in neposredni sončni svetlobi. Za dolgotrajno uporabo na istem mestu priporočamo mehko podlogo. Podloga naj pokriva območje, kjer se stol dotika tal, in območje, kjer se tal dotikajo vaša stopala.

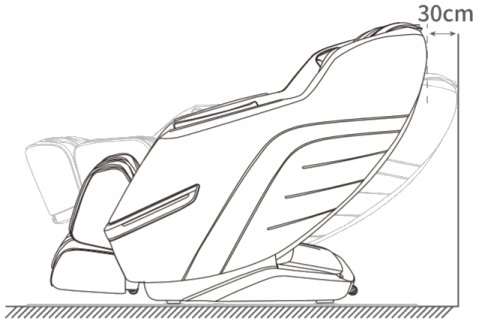


Nagnjen stol potrebuje za hrbtom 30 cm.

Dvigovanje

Stol dvigujeta in premikata vsaj dve osebi, da se ne poškodujeta.


1. Na občutljivih tleh, kot je parket, stol pri premikanju dvignite.
2. Tudi na podobnih lesenih tleh priporočamo dvig, da ne poškodujete koles. Ko stol dvignete in nesete na želeno mesto, pazite na roke in na stopala, da vas ne stisne. Stol odložite šele, ko stoji povsem ravno. Tla se lahko poškodujejo, zato priporočamo podlogo.

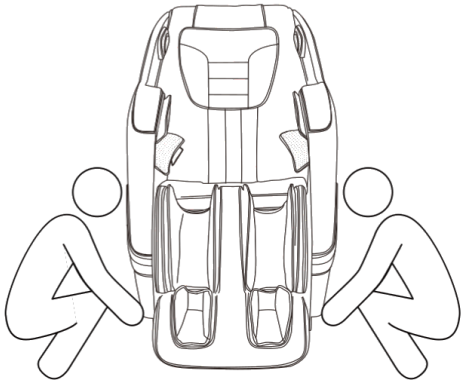
Dvig v dvoje.

Premikanje na kolesih

Stol premikajte na zadnjih kolesih: nagnite ga nazaj za približno 45°, kot kaže slika. **Opozorilo:** prevelik nagib stol prevrne in ga poškoduje.


1. Pred premikanjem stol pravilno izklopite, da se mehanizem vrne v izhodiščni položaj, nato izklopite napajanje.
2. Med premikanjem naj bo stol prazen: brez ljudi, živali in predmetov.
3. Ne vozite ga čez stopnico, višjo od 2 mm, ali čez režo, širšo od 5 mm.
4. Na kolesih ni namenjen daljšim potem. Če je razdalja večja od 50 m, ga premikajte počasi in enakomerno.

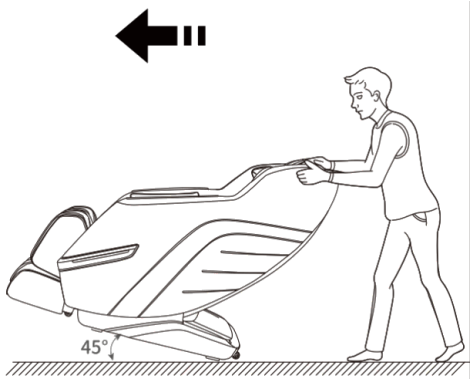


Nagib za premik: približno 45°.

Vzglavna in hrbtna blazina


Vzglavna blazina ublaži gnetenje v predelu vratu in ramen. Ali jo boste uporabljali, se odločite po svojih potrebah; priporočamo, da jo uporabljate. Hrbtna blazina je z naslonom povezana z zadrgo (1), vzglavna blazina s hrbtno pa z zadrgo (2).

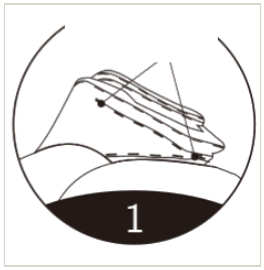

Zadrga 1: hrbtna blazina

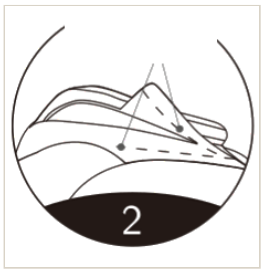

Zadrga 2: vzglavna blazina

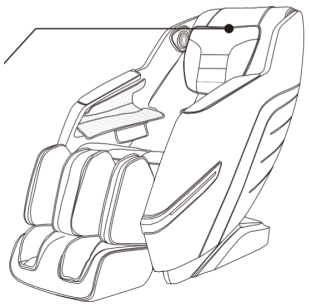


4

Pred uporabo

Preverite okolico

Prepričajte se, da okrog stola ni ljudi, hišnih živali in predmetov.

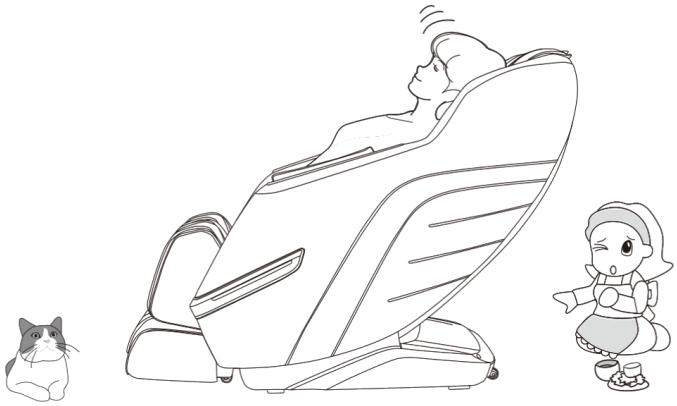

Preverite, da v režah ni tujkov

Pred masažo se prepričajte, da v predelu nog in stopal ni ujetih predmetov.


Rok, nog in glave nikoli ne potiskajte v prostor med nožnim mehanizmom in ohišjem ali med naslonom za roke in ohišjem stola.

Roke, noge in glava nikoli ne smejo zaiti pod tkanino ali umetno usnje, ki prekriva masažne predele.




Označena mesta: reže, v katere ne sme zaiti nič.


Vklop napajanja

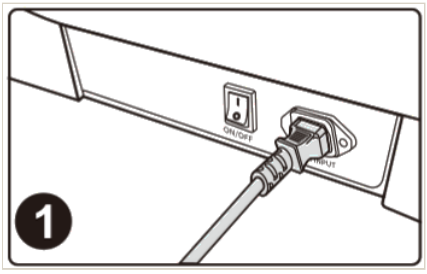

1. Napajalni kabel priključite na stol.

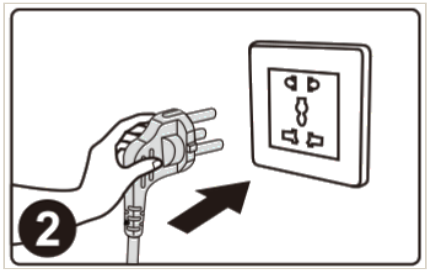

2. Vtič vtaknite v vtičnico.

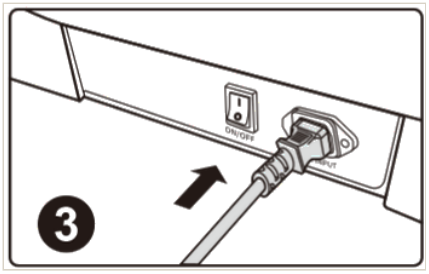


3. Stikalo preklopite v položaj »I«.

Opozorilo

- Pred uporabo preverite, ali sta napajalni kabel in vtič nepoškodovana.
- Stol priključite samo na napajanje, ki ustreza podatkom na njegovi tablici.
- Strogo prepovedano je napajanje, ki ni nazivno napajanje tega stola.
- Strogo prepovedano je priključevanje pretvornikov napetosti ali drugih naprav za napajanje stola brez dovoljenja.


Zgradba stola

Deli

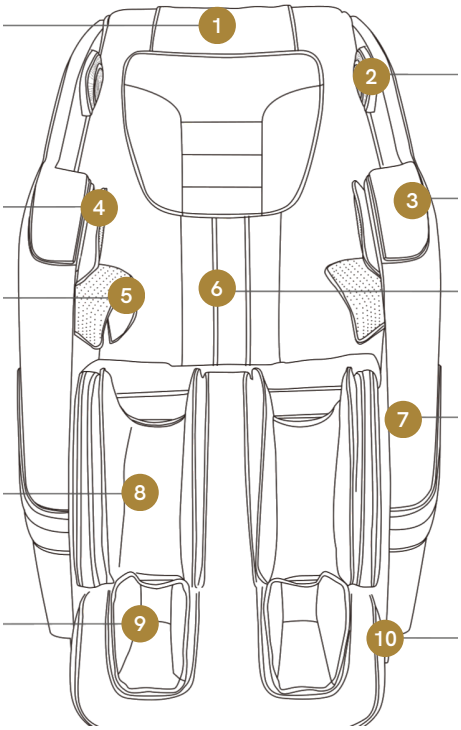


1. Vzglavna blazina
2. Pokrov zvočnika
3. Naslon za roke
4. Sklop zračnih blazin za roke
5. Žep za daljinski upravljalnik
6. Hrbtna blazina
7. Pokrov naslona za roke
8. Masaža meč
9. Masaža stopal
10. Stranski pokrov

Razporeditev funkcij

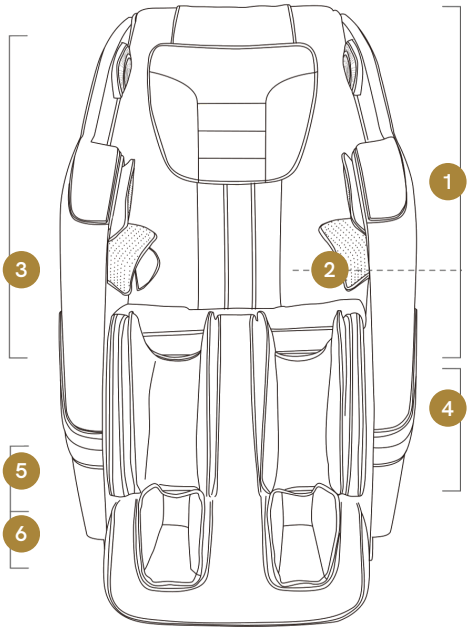

1. Od glave in vratu do sedeža: masaža z masažnimi glavami, ki se premikajo po hrbtu
2. Hrbet: ogrevanje
3. Roke: masaža z zračnimi blazinami
4. Meča: masaža z zračnimi blazinami
5. Stopala: masaža z zračnimi blazinami
6. Stopala: masaža z valji

Daljinski upravljalnik

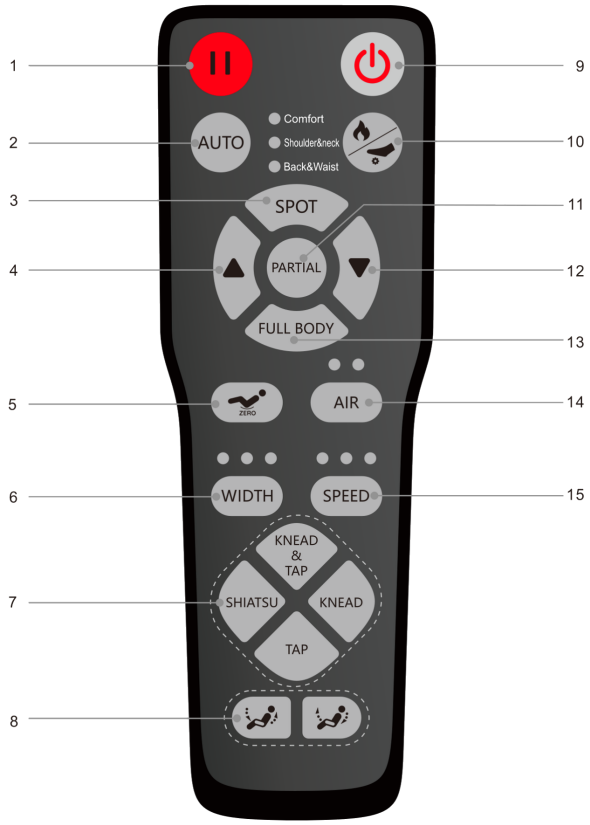

1. **Premor in nadaljevanje.** Začasno ustavi vse masažne funkcije ali jih znova zažene.
2. **Samodejna masaža (AUTO).** Izbira samodejnega programa; glejte 7A.
3. **Masaža na točki (SPOT).** Glejte 7F.
4. **Ramena navzgor (▲).** Ročno premakne položaj ramen navzgor.
5. **Samodejni nagib (ZERO).** Ciklično preklaplja med tremi samodejnimi ležečimi položaji ter izhodiščnim pokončnim položajem; glejte 7B.
6. **Širina (WIDTH).** Tri stopnje: široko, srednje in ozko; glejte 7D.
7. **Masažne tehnike (KNEAD, TAP, KNEAD & TAP, SHIATSU).** Glejte 7C.
8. **Dvig in nagib naslona.** Naslon in nožni del se premikata skupaj; glejte 7B.
9. **Vklop.** Vklopi ali izklopi vse masažne funkcije.
10. **Masaža stopal z valji in ogrevanje hrbta.** Glejte 7H.
11. **Masaža na delu (PARTIAL).** Glejte 7F.
12. **Ramena navzdol (▼).** Ročno premakne položaj ramen navzdol.
13. **Masaža celega telesa (FULL BODY).** Glejte 7F.
14. **Zračna masaža (AIR).** Nastavi moč zračnih blazin; glejte 7G.
15. **Hitrost (SPEED).** Tri stopnje: počasi, srednje in hitro; glejte 7E.

Lučke ob tipki AUTO kažejo izbrani samodejni program (Comfort, Shoulder&neck, Back&Waist). Lučke nad tipkami AIR, WIDTH in SPEED kažejo izbrano stopnjo.

7

Masaža

Začetek masaže

1. Pritisnite tipko za vklop (9). Masaža se začne s privzetim programom Udobna masaža (Comfort).
2. Stol samodejno nastavi nagib. Ta korak lahko preskočite s tipko AUTO (2).
3. Stol samodejno zazna položaj vaših ramen. Sedite tako, da se telo ves čas prilega stolu. Tudi ta korak lahko preskočite s tipko AUTO.
4. Fina nastavitev ramen: če se zaznani položaj razlikuje od dejanskega položaja ramen, ga popravite s tipkama ▲ (4) in ▼ (12). Na voljo je 11 položajev. Korak lahko preskočite s tipko AUTO. Če v 10 sekundah ničesar ne spremenite, se masaža začne.

TIPKA	KAJ DELA
▲ (4)	Masažne glave premakne navzgor do ustreznega položaja.
▼ (12)	Masažne glave premakne navzdol do ustreznega položaja.

A. Samodejni programi

S tipko **AUTO** (2) krožite med tremi programi. Lučka ob tipki pokaže, kateri program teče.

LUČKA	PROGRAM	KAJ DELA
Comfort	**Udobna masaža**	Program za kar najbolj udobno masažo.
Shoulder&neck	**Ramena in vrat**	Masaža je osredotočena na ramena in vrat.
Back&Waist	**Hrbet in ledveni del**	Masaža je osredotočena na hrbet in ledveni del.

B. Nagib stola

TIPKA	FUNKCIJA	KAJ DELA
8, leva	Dvig	Pritisnite tipko: naslon se počasi dviga, nožni del se počasi spušča in stol piska (»di ... di ...«), dokler ne doseže zgornjega položaja. Če tipko med dvigom pritisnete znova, se dvig takoj ustavi.
8, desna	Nagib	Pritisnite tipko: naslon se počasi spušča, nožni del se počasi dviga in stol piska (»di ... di ...«), dokler se ne ustavi. Če tipko med nagibanjem pritisnete znova, se nagibanje takoj ustavi.
ZERO (5)	Ničelna težnost (Zero-G)	Vsak pritisk preklopi na naslednji samodejni ležeči položaj. Skupaj so štirje položaji (vključno z izhodiščnim pokončnim), ki se ciklično menjajo. Če tipko držite 3 sekunde, vklopite ali izklopite glasovno upravljanje (glejte 7I).

C. Ročna masaža

Tehniko izberete s tipkami v skupini 7. Pri vsaki tehniki lahko nastavite spodaj navedeno.

TIPKA	TEHNIKA	NASTAVITVE
KNEAD	Gnetenje	hitrost
TAP	Tapkanje	hitrost, širina
KNEAD & TAP	Gnetenje in tapkanje	hitrost
SHIATSU	Shiatsu	hitrost, širina

D. Širina

S tipko **WIDTH** (6) ciklično preklapljate med tremi stopnjami.

STOPNJA	LUČKE
Ozko	● ○ ○
Srednje	○ ● ○
Široko	○ ○ ●

E. Hitrost

S tipko **SPEED** (15) ciklično preklapljate med stopnjami 1, 2 in 3.

STOPNJA	LUČKE
1	● ○ ○
2	○ ● ○
3	○ ○ ●

F. Masažni predel

TIPKA	PREDEL	KAJ DELA
SPOT (3)	Točka	Masaža na enem mestu.
PARTIAL (11)	Del	Masažne glave se premikajo gor in dol po manjšem območju.
FULL BODY (13)	Celo telo	Masažne glave se premikajo gor in dol po celotni poti.
▲ (4) / ▼ (12)	Položaj	V načinih točka in del premaknete masažni mehanizem navzgor ali navzdol.

G. Zračna masaža

S tipko **AIR** (14) ciklično preklapljate med tremi stopnjami moči in izklopom.

STOPNJA	LUČKE
1	● ○
2	○ ●
3	● ●
izklop (OFF)	○ ○

H. Valji za stopala in ogrevanje

Obe funkciji upravljate s tipko 10.

Masaža stopal z valji: s pritiski tipke ciklično preklapljate med štirimi stanji: šibko, srednje, močno in izklop.

Ogrevanje hrbta: tipko držite 3 sekunde, da vklopite ali izklopite infrardeče ogrevanje hrbta. Toplota se začuti po 3 minutah.

I. Glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje vklopite ali izklopite tako, da tipko **ZERO** (5) držite 3 sekunde. Proizvajalčeva navodila za ta model seznama glasovnih ukazov ne vsebujejo; če potrebujete pomoč, se obrnite na nas (stik je na zadnji strani).

8

Predvajanje glasbe prek Bluetootha

1. Na telefonu ali tablici odprite nastavitve in izberite Bluetooth. Vklopite ga; naprava začne iskati nove naprave.
2. Na seznamu poiščite stol (ime oblike **IMCM-XXXX**) in ga izberite. Če naprava vpraša, ali želite seznaniti napravo, potrdite.
3. Na telefonu zaženite predvajalnik glasbe in izberite skladbo. Glasba se predvaja iz zvočnikov ob glavi.


9

Konec masaže in izklop


Med masažo pritisnite tipko za vklop (9) na daljinskem upravljalniku. Stol takoj izklopi vse masažne funkcije ter vrne naslon in nožni del v izhodiščni položaj. Ko se izteče masažni čas, stol sam izklopi vse masažne funkcije, naslon in nožni del pa ostaneta v trenutnem položaju.

Izklop napajanja


Ko stola ne uporabljate, ga popolnoma odklopite od omrežja po spodnjih korakih.

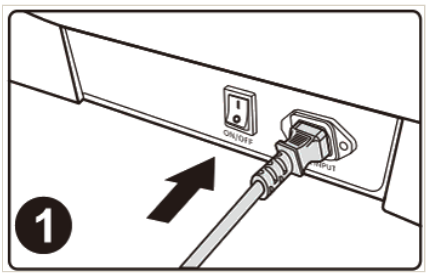

1. Stikalo preklopite v položaj »0«.

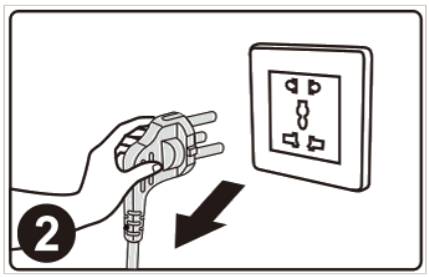

2. Vtič izvlecite iz vtičnice.

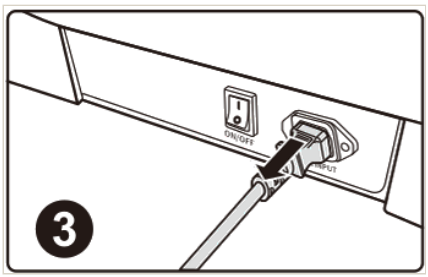

3. Napajalni kabel odklopite od stola.

10

Čiščenje in vzdrževanje


Čiščenje umetnega usnja in plastičnih delov


Umetno usnje obrišite z mehko, suho krpo.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, kot so razredčilo, bencin ali alkohol.
- Pri uporabi običajnih sredstev za nego umetnega usnja (robčkov) upoštevajte njihova navodila.
- Če je umetno usnje zelo umazano, ga očistite tako:

1. Mehko krpo namočite v vodo ali toplo vodo s 3 do 5 % nevtralnega čistila in jo dobro ožemite.
2. S to krpo obrišite površino umetnega usnja.
3. Čistilo obrišite s krpo, namočeno v čisto vodo in dobro ožeto.
4. Obrišite z ožeto mehko krpo.
5. Pustite, da se posuši na zraku.

- Trdovratne madeže odstranite z melaminsko gobico, namočeno v nevtralno čistilo.
- Površine ne sušite s sušilnikom za lase.
- Pazite pri stiku z džinsom in barvanimi tkaninami: barva tkanine lahko obarva umetno usnje.
- Deli iz umetnega usnja naj ne bodo dalj časa v stiku s plastiko, ker se razbarvajo.
- Umetno usnje se lahko razbarva tudi od barve za lase; sveže pobarvane lase pokrijte z brisačo.

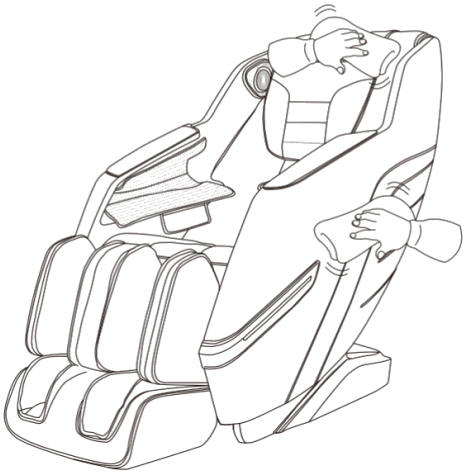

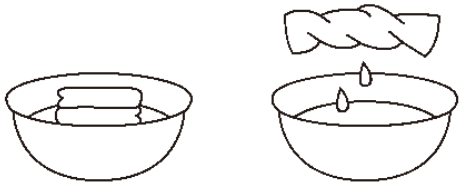

Krpa, namočena in dobro ožeta.

11

Odpravljanje težav

TEŽAVA	REŠITEV
Ko nožni del ali naslon doseže določen položaj, se ob pritisku tipke ne premakne več, stol pa neprekinjeno piska.	Zaradi zasnove stola in ergonomskih zahtev je nastavitev položaja omejena. Ob skrajnem položaju se oglasi opozorilni zvok. To je običajno.
Po vklopu nekatere ali vse funkcije ne delujejo.	Po vklopu s tipko za vklop morate ročno izbrati samodejni program ali drug način delovanja. Če tega ne storite, se stol po 20 minutah samodejno izklopi. V ročnem načinu so neizbrane funkcije lahko izklopljene; nastavite jih ročno.
Pri spreminjanju položaja se sliši drgnjenje umetnega usnja.	Stol je prevlečen s kakovostnim umetnim usnjem, ki ustreza okoljskim zahtevam. Zaradi lastnosti materiala je rahel zvok drgnjenja med deli, ki se premikajo drug ob drugem, običajen. **Če med delovanjem zaslišite zvok trganja tkanine ali umetnega usnja, stol takoj nehajte uporabljati in pokličite servis.**
Masažne glave ne dosežejo ramen ali vratu.	Če glava ni naslonjena na vzglavno blazino ali hrbet ni naslonjen na naslon, stol pri zaznavanju postave rame zazna nižje, kot so v resnici. Sedite v najglobljem položaju, glavo naslonite na vzglavnik in masažo začnite znova.
Stol je poškodovan. Napajalni kabel ali vtič je nenavadno vroč.	Da preprečite nesrečo, se obvezno obrnite na pooblaščeni servis.
Stol obstane v nagnjenem položaju.	To se zgodi v teh primerih: 1 okvara napajanja, 2 nenaden izpad elektrike, 3 konec masažnega programa: masažne funkcije (valji, zračne blazine, ogrevanje) se izklopijo, stol pa ostane v nagnjenem položaju. Da stol vrnete v pokončni položaj, ga s tipko za vklop (9) na daljinskem upravljalniku vklopite in znova izklopite.

Za vsa vprašanja in dvome o izdelku se obrnite na servis, naveden na zadnji strani.

12

Tehnični podatki

Ime modela	iRest Chillin+
Oznaka	A360
Vrsta izdelka	masažni stol
Nazivna napetost	220–240 V~, 50/60 Hz
Nazivna moč	80 W
Nazivni čas delovanja	20 min
Razred zaščite	razred I
Bluetooth	oddajna moč 2,5 mW
Materiali	PVC, PA, jekleni deli, električni in elektronski deli
Oblazinjenje	umetno usnje (PVC)
Barvi	črna, bež

Mere (pokončno)	152 × 76 × 115 cm (dolžina × širina × višina)
Mere (nagnjeno)	168 × 76 × 94 cm (dolžina × širina × višina)
Širina sedeža	50 cm
Teža stola	75 kg
Največja višina uporabnika	200 cm
Največja teža uporabnika	150 kg

Električni podatki so iz proizvajalčevih navodil, mere in omejitve uporabnika iz proizvajalčevega gradiva. Izvirna navodila navajajo tudi izvedbo 110–120 V~, 60 Hz za druge trge. Merodajni so podatki na tablici izdelka.



Mere stola pokončno in nagnjeno (vir: iRest).

13

Odlaganje izrabljenega stola



Tudi vi lahko prispevate k varstvu okolja. Izrabljenega stola ne odvrzite med gospodinjske odpadke, ampak ga oddajte na zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo, ki ga določi vaša občina. Materiali, iz katerih je stol izdelan, so lahko dragocene surovine za predelavo; nepravilno odloženi pa lahko škodujejo okolju.

Servis, garancija in stik

Prodajalec in servis v Sloveniji

HEKO
LANBOR, trgovina in storitve, d.o.o.
Ulica Franca Rozmana-Staneta 4
4000 Kranj

Telefon: +386 41 830 401
E-pošta: info@heko.si
Splet: heko.si

Pred klicem si pripravite oznako modela (A360) in številko računa.

Garancija

Garancijski pogoji so navedeni v pogojih prodaje, ki ste jih prejeli ob nakupu, in na računu.

Ta navodila v obliki PDF: skenirajte kodo ali odprite **heko.si/navodila/irest-chillin-plus-a360-sl.pdf**. Natisnjen izvod vam na željo brezplačno pošljemo.

iRest Chillin+ (A360), navodila za uporabo v slovenščini, različica 1.1, oktober 2026. Prevod po angleških navodilih proizvajalca; ob neskladju velja izvirnik. Besedilo in slike so last proizvajalca in HEKO. Pridržujemo si pravico do sprememb.